

Produktbroschüre

08.08.2026

KERN PLJ 720-3A

Präzisionswaagenserie mit enormen Wägebereichen – ideal bei schweren Taragefäßen oder großen Proben


DEUTSCH



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

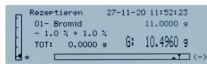

MERKMALE

- Komfortables Rezeptieren mit der Rezeptdatenbank, in der bis zu 99 Rezepte mit jeweils bis zu 20 Rezepturbestandteilen mit Name und Sollwert hinterlegt werden können
- Interner Speicher für komplette Rezepturen mit Name und Sollwert der Rezepturbestandteile. Displayunterstützte Benutzerführung
- Schnelles und effizientes Arbeiten dank Grafikdisplay
- Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
- Einfache Klartext-Bedienführung im Display in den Sprachen DE, EN, FR, IT, ES, PT
- Interne Justierautomatik, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
- Ringförmiger Windschutz serienmäßig, Wägeraum $\varnothing \times H$ 150×60 mm
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

TECHNISCHE DATEN

- Hinterleuchtetes Grafik-LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- Abmessungen Wägefläche $\varnothing$ 110 mm, Edelstahl
- Gesamtabmessungen
B×T×H 210×340×120 mm (ohne Windschutz)
B×T×H 210×340×160 mm (inkl. Windschutz)
- Wägeprinzip: Kraftkompensation
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 15 °C/35 °C

HAUPTANWENDUNGSBEREICHE

- Laboranwendungen
- Forschung und Entwicklung
- Schmuck- und Edelmetallprüfung
- Umweltanalyse
- Elektronikindustrie

PIKTOGRAMME

Standard



Option



MODELLÜBERSICHT

Modell	Wägebereich [Max]	Ablesbarkeit [d]	Reproduzierbarkeit	Linearität	Abmessungen Wägefläche
PLJ 420-3F	420 g	0,001 g	0,001 g	± 0,003 g	110 mm
PLJ 720-3A	720 g	0,001 g	0,001 g	± 0,002 g	110 mm
PLJ 1200-3A	1200 g	0,001 g	0,001 g	± 0,003 g	110 mm
PLJ 2000-3A	2100 g	0,001 g	0,002 g	± 0,004 g	110 mm
PLJ 4200-2F	4200 g	0,01 g	0,02 g	± 0,04 g	160 mm
PLJ 6200-2A	6200 g	0,01 g	0,01 g	± 0,05 g	160 mm

DEUTSCH

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
315-109-206	Safety Set 315-109-206, enthaltene Gewichte 50 g (F1); 500 g (E2)
572-926	RS-232 Schnittstellenkabel 572-926
ALT-A02	Dichtebestimmungsset ALT-A02
PLJ-A01S05	Arbeitsschutzhaube PLJ-A01S05, Lieferumfang 5 Stück
PLJ-A02	Haken für Unterflurwägung PLJ-A02
PLJ-A09	Arbeitsschutzhaube PLJ-A09
PLJ-A09S05	Arbeitsschutzhaube PLJ-A09S05, Lieferumfang 5 Stück
YKC-01	Thermodrucker YKC-01
YKG-01	Dot-Matrix Drucker YKG-01
YKH-01	Thermodrucker YKH-01
YKI-02	RS232-Bluetooth-Adapter YKI-02
YKI-10	RS232-Ethernet Konverter YKI-10 (RS-232 serienmäßig, Ethernet, RS-485)
YKI-11	RS232-Ethernet Konverter YKI-11 (Ethernet, RS-232 serienmäßig - 2x)
YKI-12	RS232-WLAN-Konverter YKI-12
YKT-01	Nadeldrucker YKT-01
YPS-03	Antivibrationstisch YPS-03

Modell	Beschreibung
YPS-04	Antivibrationsplatte KERN YPS-04 (400×450×60 mm, 30 kg)
YPS-05	Antivibrationsplatte KERN YPS-05 (565×450×60 mm, 42 kg)

SOFTWARE

Modell	Beschreibung
SCD-4.0-DL	Software SCD-4.0-DL (Lieferumfang: Downloadlink für 1 Lizenz)
SCD-4.0-DLS05	Software SCD-4.0-DLS05 (Lieferumfang: Downloadlink für 5 Lizenzen)
SCD-4.0-PRO-DL	Software SCD-4.0-PRO-DL (Lieferumfang: Downloadlink für 1 Lizenz)
SCD-4.0-PRO-DL-AS05	Software SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (Lieferumfang: Downloadlink für 5 Lizenzen)

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
963-103	DAkkS-Kalibrierschein 963-103
969-517	Bestätigung der Herstellerspezifikation (nur in Verbindung mit DAkkS-Kalibrierschein) 969-517
970-106	Garantieverlängerung (+ 2 Jahre) 970-106

KERN Piktogramm-Übersicht

	Interne Justage: Einstellen der Genauigkeit durch internes Justiergewicht
	Datenschnittstelle RS-232: Zum Anschluss an Drucker, PC oder andere Peripheriegeräte zur Datenübertragung über größere Strecken. Netzwerk in Bus-Topologie möglich
	GLP/ISO-Protokoll: Das Messgerät erzeugt einen GLP-konformen Ausdruck
	Wert & Zeit: Das Messgerät gibt Wert, Datum und Uhrzeit aus, unabhängig vom angeschlossenen Drucker
	Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht
	Formulation: Interner Speicher für komplette Rezepturen mit Name und Sollwert der Rezeptur-Bestandteile. Displayunterstützte Benutzerführung
	Dichtebestimmung: Die Dichtebestimmung von Flüssigkeiten und Feststoffen mit einer Dichte von $\leq / \geq 1$ wird direkt im Messgerät durchgeführt
	Prozentbestimmung: Feststellen der Abweichung in % vom Sollwert (100 %)
	Messen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Oberer und unterer Grenzwert programmierbar, z. B. zum Sortieren, Portionieren oder zur Messung von Beschichtungen oder Materialstärken. Der Vorgang wird durch ein akustisches und/oder optisches Signal unterstützt
	Unterflurwägung: Möglichkeit der Lastaufnahme an der Waagen-Unterseite
	Universal-Steckernetzteil: Mit Universaleingang und optionalen Eingangsstecker-Adaptern für EU, CH, GB oder EU, CH, GB, US oder EU, CH, GB, US, AUS
	Wägeprinzip Elektromagnetische Kraftkompensation: Spule in einem Permanentmagneten. Für genaueste Wägungen
	Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag
	Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage